MegGyverKit
メガイバーキット

株式会社メガジェンジャパン
MegagenJapan,Inc.


〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-1-6 船場ミッドキューブ4階
TEL 06-6281-3535　FAX 06-6281-3538
Web: www.megagen.jp　E-mail: info@megagen.jp


一般医療機器
販売名：メガイバーKit
製造販売届出番号：40B1X10003GE0177

MEGA'GEN JAPAN
For Lifetime Smiles


MegGyverKit
メガイバーキット

·Removes broken fixtures, abutments &screws with just one kit
·Wide compatibility, strength supplementation, detailed composition
·Simple and easy use that anyone can solve

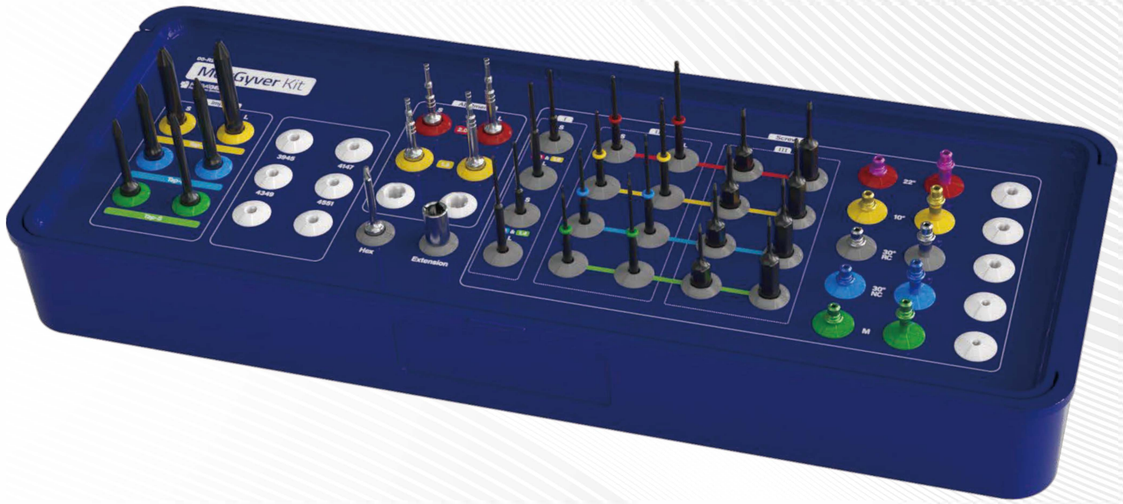

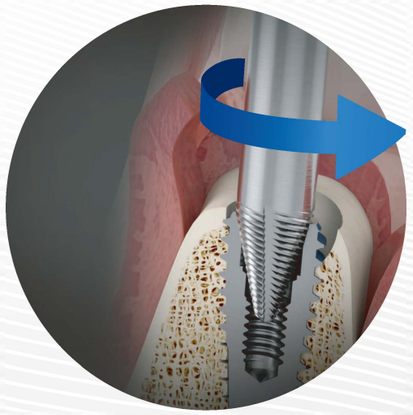

Easy, Fast. Magic Grip
Just turn counter clockwise!

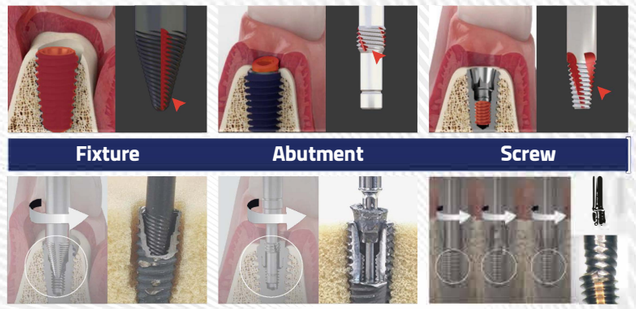

01
高強度の特殊ステンレス素材
耐久性に優れているためスムーズな
フィクスチャー除去が可能

02
様々な除去ケースに対応
Fixture破折／Abutment破折
Abutment Screw破折／ネジ穴の破折


03
簡単な使用方法
最短1ステップで除去が可能



使用方法

Ref.C
MKMG30000M

Abutment Remover

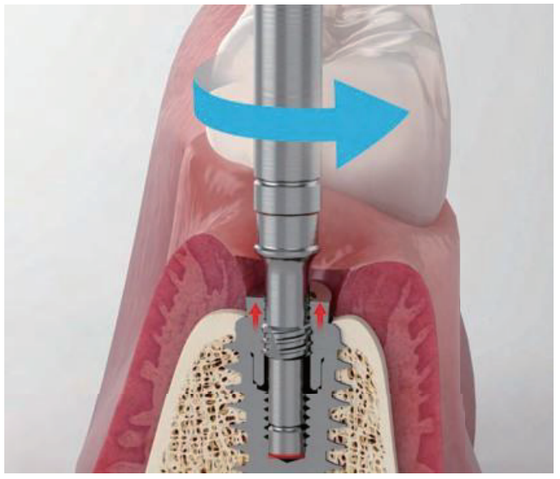


反時計回りに回転させ、アバットメントを除去します。



Abutment Remover (アバットメントリムーバー)


Type	Length	Ref.C
M1.8	19mm	ARS18
	24mm	ARL18
M2.0	19mm	ARS20
	24mm	ARL20

単回使用

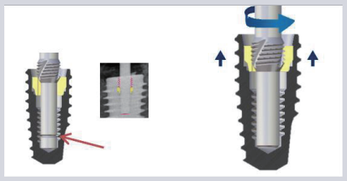

アバットメントの破折が深くアバットメント
リムーバーが噛み合わない場合は、矢印部を
カットし、高さ調整を行なってください。

Implant Tapping Remover

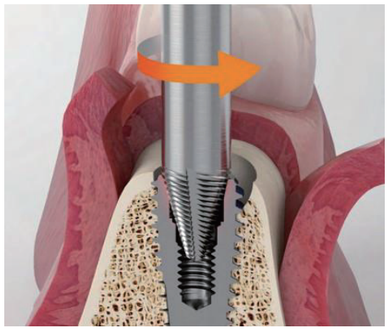

反時計回りに回転させ、インプラントを除去します。除去が難しい場合はトレフィンバー等で骨を一部除去後、再度使用してください。




Implant Tapping Remover (インプラントタッピングリムーバー)

Type	Length	Ref.C
Small	19mm	*ITR25U
	24mm	ITR25S
	29mm	ITR25L
Regular	19mm	*ITR35U
	24mm	ITR35S
	29mm	ITR35L
Wide	19mm	*ITR45U
	24mm	ITR45S
	29mm	ITR45L

使用回数10回を目途に交換をお願いします。 *別売

Small
Connection
～Ø2.5

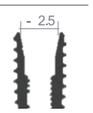

Regular
Connection
Ø2.5 ～Ø3.2



Wide
Connection
Ø3.2～Ø4.4





Hex Remover (ヘックスリムーバー)


Type	Length	Ref.C
Hex1.2	16mm	*HSS
	21mm	HSL

*別売




ネジ頭が破損し、取り出し不可の場合
ラチェットレンチに取り付け、反時計
回りに回転させ除去します。

Screw Remover

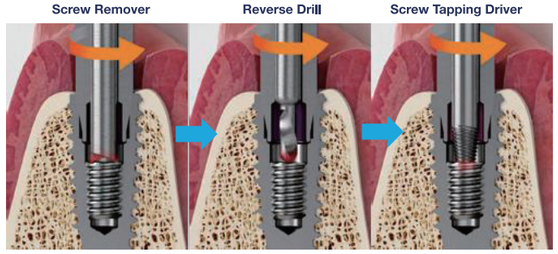


反時計回りに回転させ、アバットメントスクリューを除去します。
スクリューリムーバーで除去できない場合は、リバースドリルと
スクリュータッピングドライバーを用いて除去してください。

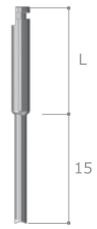

Screw Remover (スクリューリムーバー)

Type	Length	Ref.C
M1.4/M1.6	15mm	SS1416S
	25mm	SS1416L
M1.8/M2.0	15mm	SSS
	25mm	SSL

推奨回転数:30~50rpm
単回使用

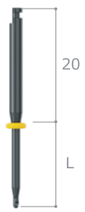

Reverse Drill (リバースドリル)

Type	Length	Ref.C
M1.4	14mm	RDS14
	19mm	RDL14
M1.6	14mm	RDS16
	19mm	RDL16
M1.8	14mm	RDS18
	19mm	RDL18
M2.0	14mm	RDS20
	19mm	RDL20

推奨回転数:2000rpm



Screw Tapping Driver
(スクリュータッピングドライバー)

Type	Length	Ref.C
M1.4	19mm	STDS14
	24mm	STDL14
M1.6	19mm	STDS16
	24mm	STDL16
M1.8	19mm	STDS18
	24mm	STDL18
M2.0	19mm	STDS20
	24mm	STDL20

推奨トルク値　M1.4:15~25N/M1.6:25~35N
M1.8:35~45N/M2.0:35~45N