

MEGAGEN Japan

# MEGA ISQ II™

非接触インプラント安定性測定器

**Save** the life with the traffic signal  
**Safe** device for implant treatments



**for confidence  
in implant surgery.**

歯接触分析装置

**MEGA ISQ2™**


販売名：メガISQ2

一般的名称：歯接触分析装置 70700000


医療機器届出番号：40B1X10003GE0114

医療機器の分類：一般医療機器 / 特定保守管理医療機器

メガISQ2は非接触で正確なインプラントの安定性「ISQ値」を測定することが可能です。  
Comfortable, fast and easy to use.

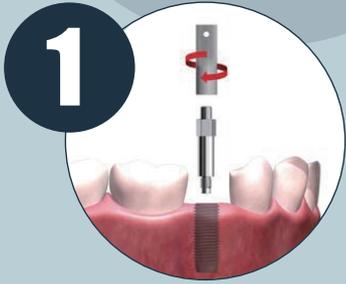

スマートペグマウントを用いて、  
スマートペグをインプラントに連結します。

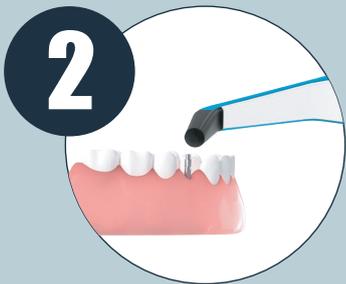

プローブから磁気を発し、共振周波数を測定します。



ISQ値『インプラント安定指数』が測定され、ディスプレイに表示されます。



- 顎のラインに沿って(mesio-distal direction)測定をしてください。その後は顎のラインの垂直方向(bucco-lingual direction)で測定してください。  
- 垂直方向での測定が困難の場合は他の回転角度で測定します。  
- 電磁気干渉ノイズがあると測定ができない場合もあります。この際には警告信号が鳴りますので、電磁気干渉を起こすものを除去して測定してください。

客観的な数値で安定性を評価し  
荷重時期を計画することができます。



歯接触分析装置

## MEGA ISQ2™

販売名：メガ ISQ2  
一般的名称：歯接触分析装置 70700000  
医療機器届出番号：40B1X10003GE0114  
医療機器の分類：一般医療機器 / 特定保守管理医療機器

Description	RefC	
MEGA ISQ2	OSSTELL-ISQ2	
Smart Peg	* AnyOne type	OSSTELL-A077
	* AnyRidge type	OSSTELL-AR67

(\*) 別売  
スマートペグ：標準価格：17,000円(税別)



製造販売元

Geo  
GeoMedi

株式会社ジオメディ

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅前南1-7-22ブラックローンビル6F  
TEL 092-409-4050 FAX 092-409-4051



MEGAGEN Japan  
株式会社メガジェンジャパン

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-3-4アソルティ本町8F  
TEL 06-6266-3535 FAX 06-6266-3536  
Web: www.megagen.jp E-mail: info@megagen.jp

